




Формирование температурного листа пациента врачом

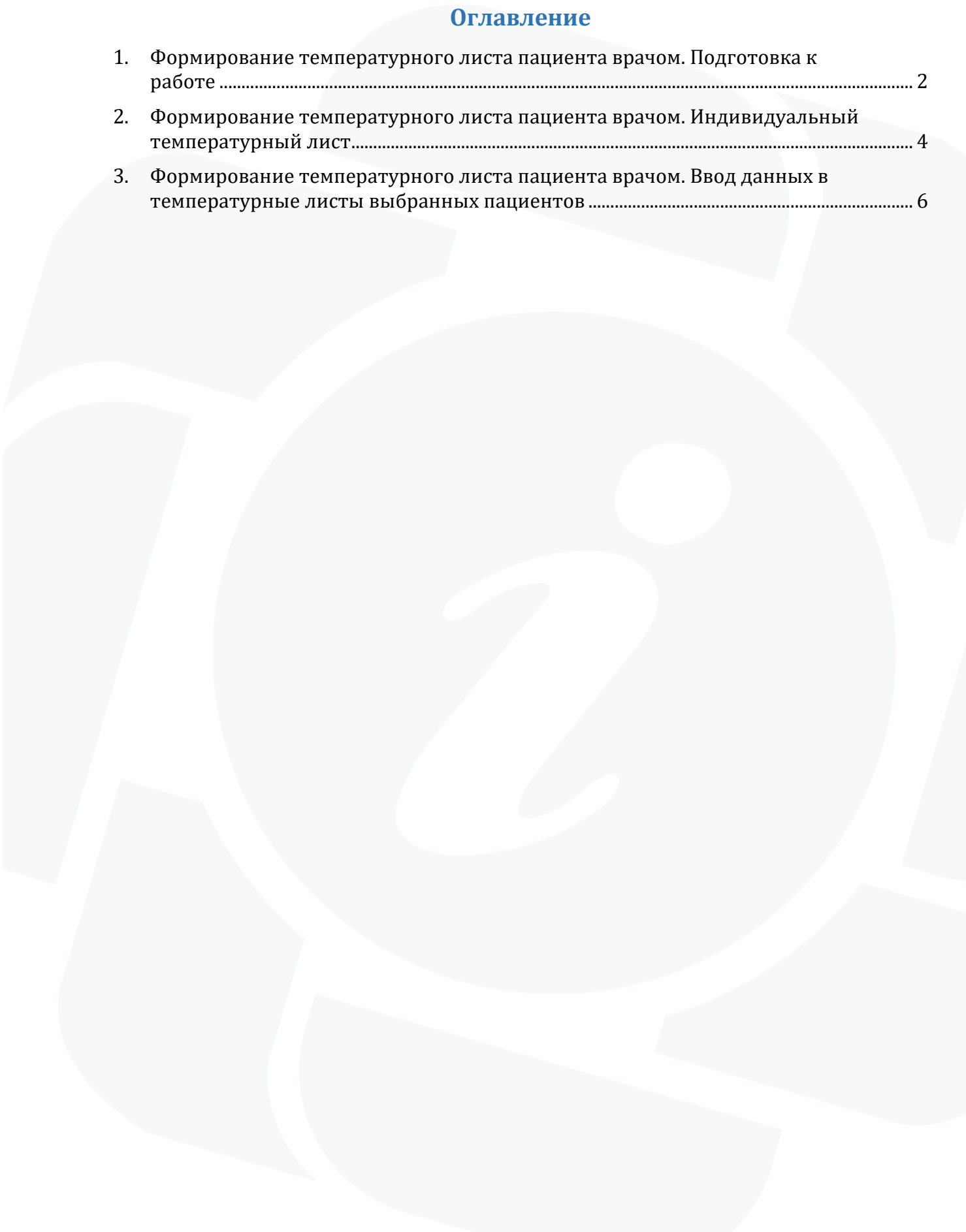

Оглавление

1. Формирование температурного листа пациента врачом. Подготовка к работе 2
 2. Формирование температурного листа пациента врачом. Индивидуальный температурный лист..... 4
 3. Формирование температурного листа пациента врачом. Ввод данных в температурные листы выбранных пациентов 6
- 

1. Формирование температурного листа пациента врачом. Подготовка к работе

Данная форма температурного листа доступна в 166 версии МИС и старше.

В меню «Работа» - «Стационарный монитор» вкладка Присутствуют: в правом нижнем углу жмем кнопку Температурный лист (рисунок 1).

Рисунок 1 – Окно «Стационарный монитор»

Выпадающее меню содержит два сценария вывода температурного листа:

- Индивидуальный температурный лист;
- Ввод данных в температурные листы выбранных пациентов.

1. Индивидуальный температурный лист позволяет вносить фактическую температуру или просматривать график изменения температуры за определенный период одного пациента.

2. Ввод данных в температурные листы выбранных пациентов позволяет вносить фактическую температуру или просматривать график изменения температуры за определенный период нескольких выбранных пациентов.

Также Температурным листом можно пользоваться индивидуально для пациента из формы случая обслуживания по одноименной кнопке (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Форма случая обслуживания

Видимость кнопки «Температурный лист» настраивается в типе события (Справочники/учет/типы событий) (Рисунок 3)

The image shows a configuration window for event types. It contains a list of settings, each with a dropdown arrow on the left and a checkbox on the right. The setting 'Показывать кнопку "Температурный лист"' is highlighted with a red rectangular box. The checkbox for this setting is checked. Other visible settings include 'Разрешать ввод направления' (unchecked), 'Требуется ввод внешнего идентификатора' (checked), 'Показывать кнопку "Сохранить и создать счет"' (checked), 'Показывать кнопку "Назначение ЛС"' (unchecked), 'Показывать кнопку "Работы"' (unchecked), 'Подлежит выгрузке в ИЭМК' (checked), and 'Активный' (checked).

Настройка	Состояние
Разрешать ввод направления	Не отмечено
Требуется ввод внешнего идентификатора	Отмечено
Показывать кнопку "Сохранить и создать счет"	Отмечено
Показывать кнопку "Температурный лист"	Отмечено
Показывать кнопку "Назначение ЛС"	Не отмечено
Показывать кнопку "Работы"	Не отмечено
Подлежит выгрузке в ИЭМК	Отмечено
Активный	Отмечено

Рисунок 3 – Настройки видимости температурного листа в типе события

2. Формирование температурного листа пациента врачом. Индивидуальный температурный лист

В вышеуказанном выпадающем меню выбираем пункт Индивидуальный температурный лист.

Редактор температурного листа

27.01.2022 нет Время 15:00:00

Исполнитель Иванов И.Н., Терапевт

	Значение
День болезни	7
Пульс	
АД-макс	
АД-мин	
Температура	36,6
Дыхание	
Сатурация	
Вес	
Вып. жидкость	
Введ. жидкостей парентерально	
Суточный объем мочи	
Стул	
Гиг. ванны	☐
Спец. процедуры	

Сохранить Печать Отмена

Рисунок 4 – Редактор температурного листа

В появившемся окне «Редактор температурного листа» можно задать дату, время, а также указать исполнителя (1) в указанных полях (Рисунок 4).

В поле Температура (2) в столбце «Значение» фиксируем температуру пациента, далее сохраняем изменения и для просмотра нажимаем на кнопку «Печать» (3).

На выбор будут доступны настроенные для температурного листа шаблоны печати. Первично настраиваются следующие шаблоны:

- «Лист регистрации показателей жизненно важных функций организма», отображающий одноименный лист ф.003/у по приказу МЗ РФ от 05.08.2022 № 530н;
- «Графики», визуализирующий изменения температуры, пульса и давления в формате графиков.

В параметрах шаблонов печати необходимо задать период, который должен быть отображен, и количество столбцов с измерениями, которое должно быть размещено на одной странице. Для графиков возможно отключение визуализации температуры, пульса или давления (Рисунок 5).

Парамет...

С 12.08.2023

По 25.08.2023

Кол-во столбцов 15

OK Отмена

Парамет...

С 12.08.2023

По 25.08.2023

Кол-во столбцов 15

☒ Давление

☒ Пульс

☒ Температура

OK Отмена

Рисунок 5 – Параметры формирования шаблонов печати

Для отображения шаблонов печати в окне с параметрами нужно нажать кнопку «OK».

Лист регистрации показателей жизненно важных функций организма

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (при наличии) _____, возраст _____, рост пациента, см _____

Сутки пребывания в стационаре, дневном стационаре	45	46	47	48								49	50		
Дата	18.08	19.08	20.08	21.08								22.08	23.08		
Время				15:53	15:54	15:56	16:11	16:12	16:14	16:15	16:16	16:18	16:19		
Температура тела, (С°)															
выше 41															
40-40,9								39,0					39,9		
39-39,9															
38-38,9															
37-37,9						37,8									
36-36,9			36,6												
35-35,9															
ниже 35															
SpO2				130		33							110		
Суточный объем мочи (мл)				170								100			
Выпито жидкостей (в мл) парентерально				160							90				
Выпито жидкости (мл)				150					70	80					
Частота дыхания				120				60							
Масса тела (кг)				140,0				50,0							

☐ Добавить отступ сверху (мм)

Сохранить Печать Подписать и прикрепить Редактировать Отладка Закрыть

Рисунок 6 - Шаблон «Лист регистрации показателей жизненно важных функций организма»

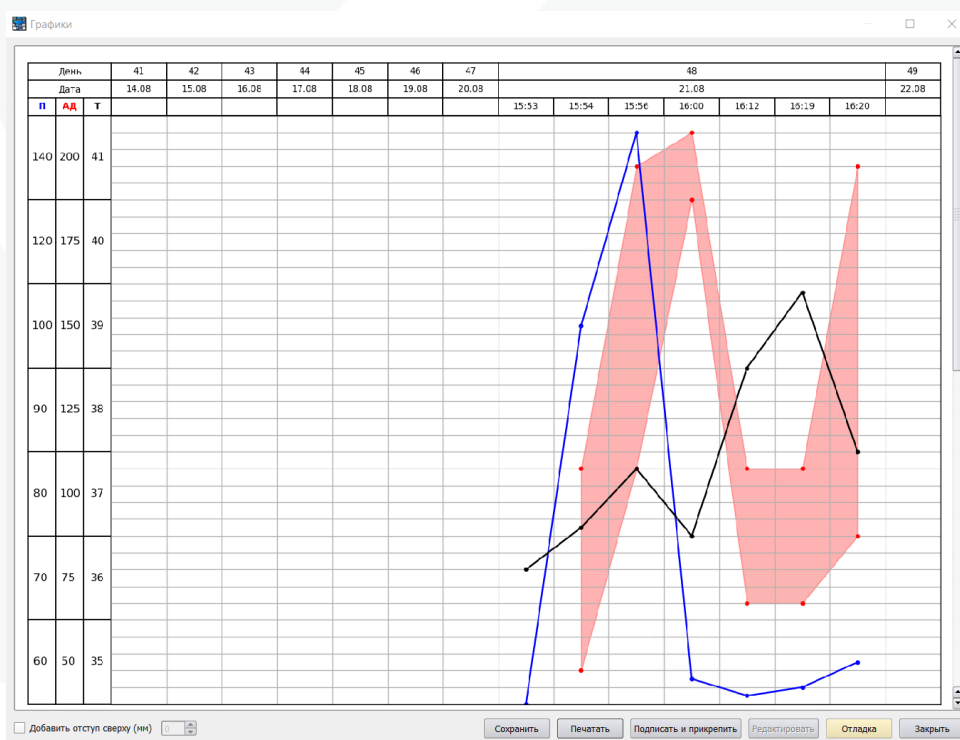


Рисунок 7 - Шаблон «Графики»

3. Формирование температурного листа пациента врачом. Ввод данных в температурные листы выбранных пациентов

Для вывода информации температурных листов нескольких пациентов в окне Стационарный монитор во вкладке «Присутствуют» выделяем необходимых пациентов (1) сочетанием клавиш Shift+ЛКМ или Ctrl+ЛКМ, жмем «Температурный лист» и в выпадающем меню выбираем пункт «Ввод данных» (2) в температурные листы выбранных пациентов (Рисунок 8).

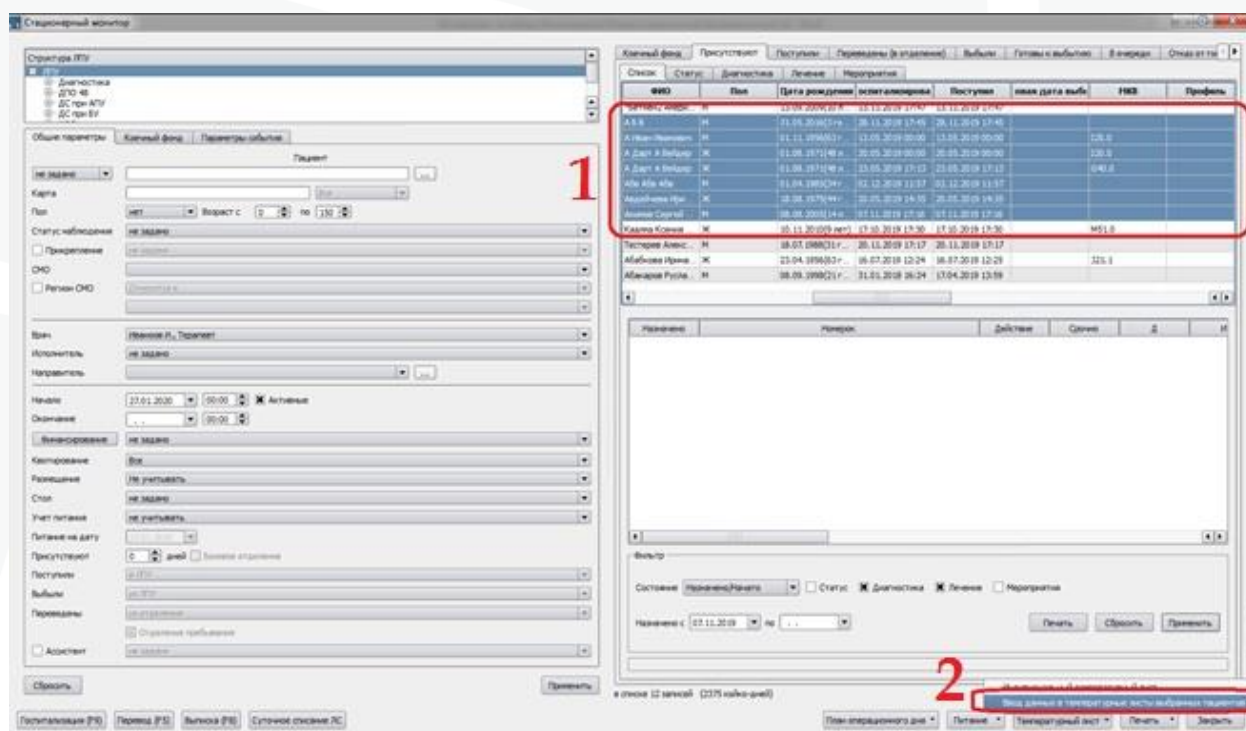


Рисунок 8 – Выбор нескольких пациентов.

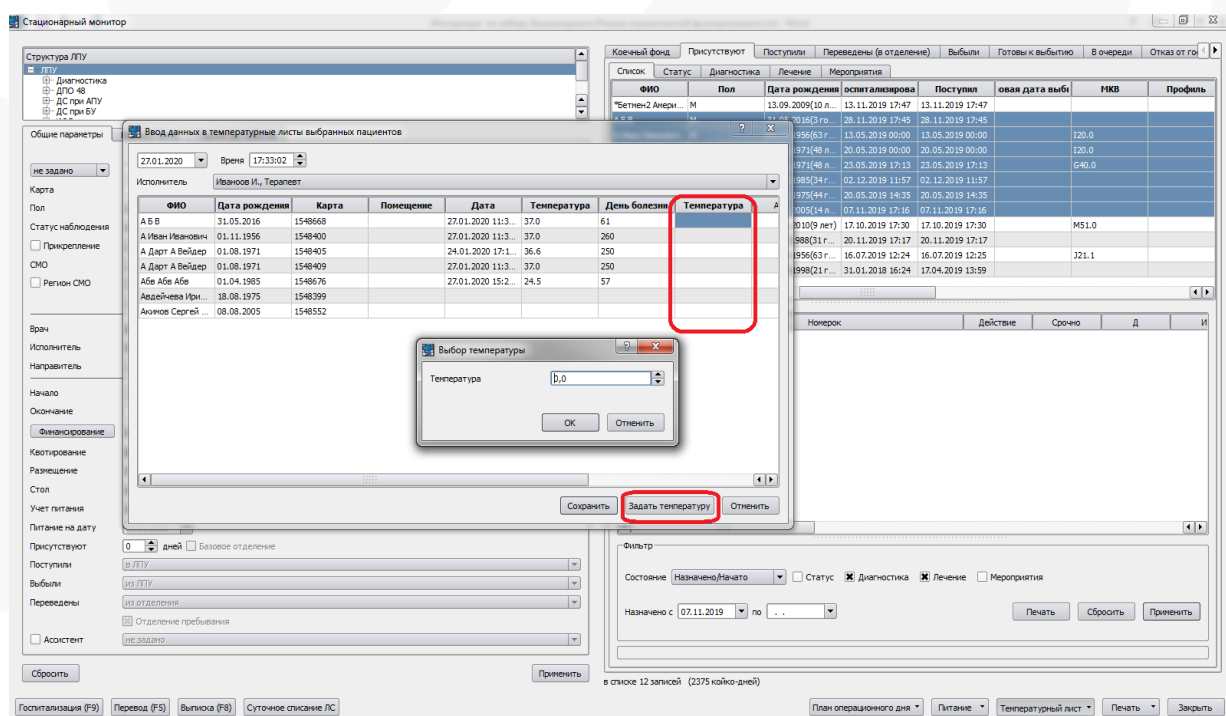


Рисунок 9– Температура нескольких пациентов

В пустом столбце «Температура» задаём необходимую температуру каждого пациента отдельно, а если необходимо проставить всем одно и то же значение жмем кнопку «Задать температуру». В поле «Температура» указываем нужную температуру группы пациентов, далее «ОК» (Рисунок 9) Результатом столбец «Температура» будет заполнен автоматически (Рисунок 10).

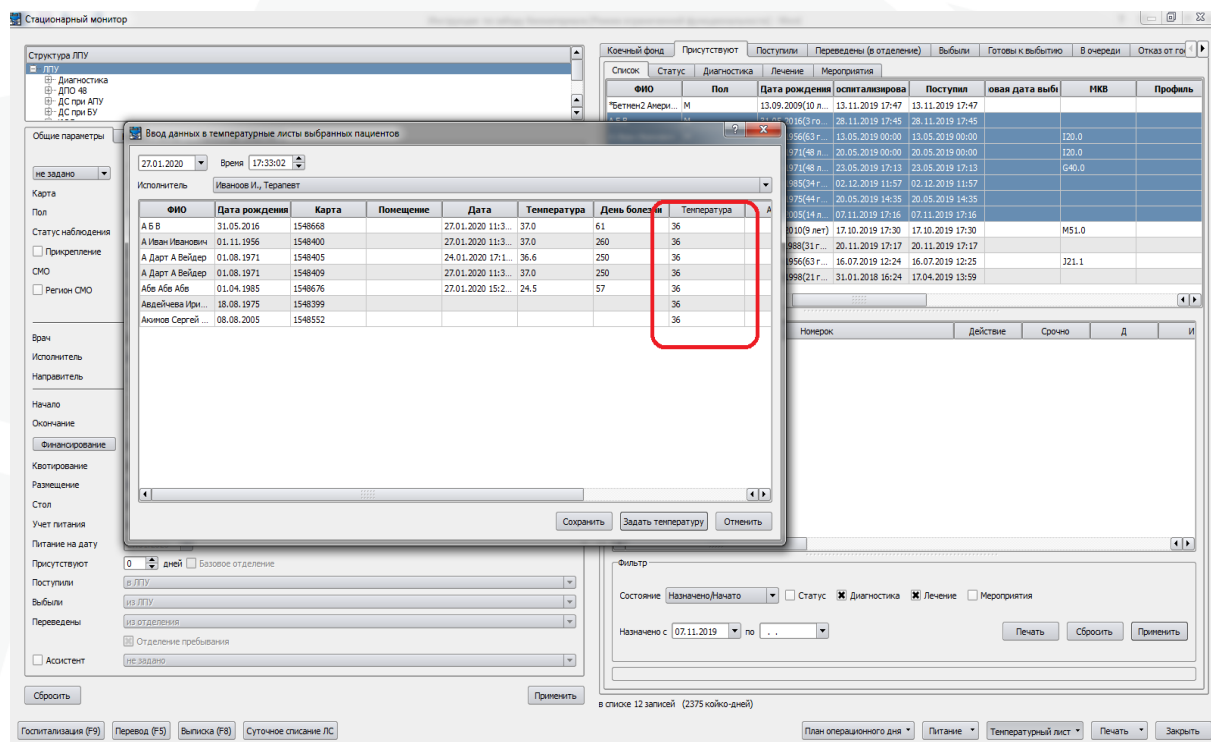


Рисунок 10 - Результат